

Tre viktiga steg att göra hemma innan du startar DEXCOM G6 tillsammans med Tandem t:slim X2


Nu är det dags att starta ditt Dexcom G6-system* tillsammans med din Tandem t:slim X2 med Basal-IQ-teknologi. Om du vill använda din smartphone som enhet och för att få tillgång till följarfunktionen behöver du förbereda tre viktiga steg innan CGM-starten. Allt för att du ska få en så smidig start som möjligt. Du har dessa tre steg beskrivna i den här foldern. Har du några frågor, tveka inte att ringa eller maila till vår kundsupport så hjälper vi dig.

* Kontrollera att din enhet är kompatibel på:
www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

DEXCOM G6: så fungerar det



I sändaren finns systemets "hjärna"

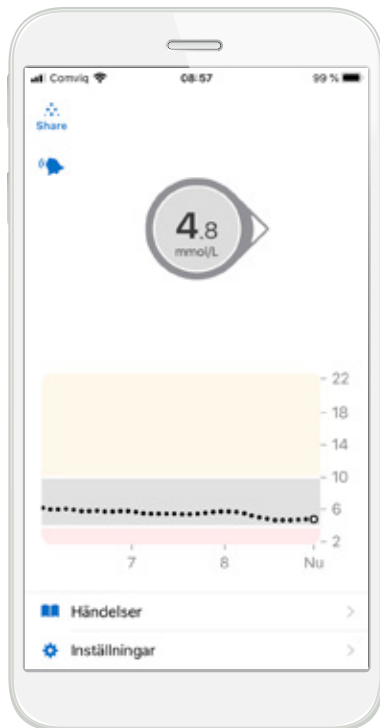



Din smartenhet*
med Dexcom-app



Din Tandem t:slim X2 med
Basal-IQ-teknologi

Bilderna i Dexcom G6 appen och Follow appen är endast visningsexempel

*För kompatibla enheter se www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

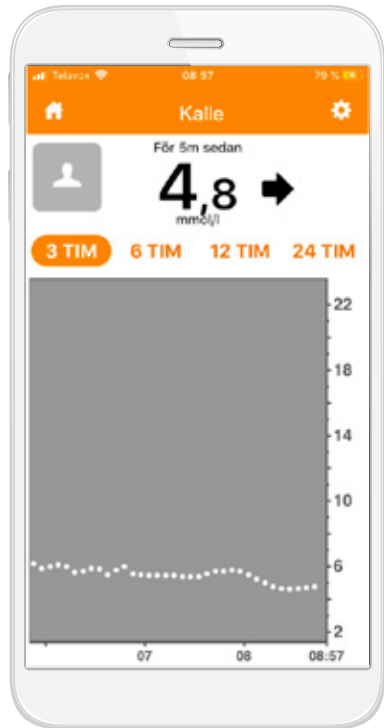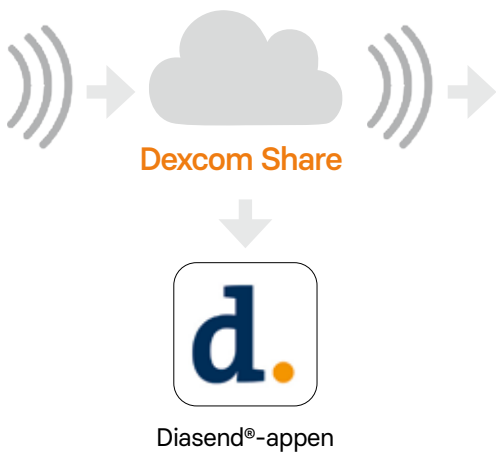

Följarens smartenhet*
med Dexcom Follow

För senaste nytt, följ oss på

[facebook.com/rubinmedical](https://www.facebook.com/rubinmedical)

Kundsupport vardagar 08–16.30: **040-15 54 80**

Teknisk pumpsupport övrig tid: **044-330 220**

www.rubinmedical.se

Rubin
medical

Steg 1: Ladda ner Dexcom G6-appen (för dig som bär sensorn)



1. Ladda ner Dexcom G6-appen från App Store eller Google Play.
2. Skapa ett Dexcom-konto (om du inte redan har ett) i din app. Du kan också skapa ett konto på www.dexcom.com. Logga sedan in i din Dexcom G6-app med samma inloggningsuppgifter.
3. Läs säkerhetsinformationen som följer men stanna när det är dags att lägga in sändarens ID-nummer. Resten gör vi på kliniken vid starten.

OBS! Var noga med att skriva ned och spara dina användaruppgifter! Framför allt är användarnamn och lösenord viktiga för att kunna logga in.

Tänk på att:

Sensorperioder ska alltid startas först via pumpen, appen är endast visningsenhet!

Stäng av Bluetoothfunktionen på din telefon för att inte störa när sändaren ansluter till pumpen.

Visningsnamn

E-postadress

Användarnamn (används vid inloggning)

Lösenord (används vid inloggning)

Steg 2: Anslut Dexcom G6-appen till Diasend



Från Dexcom G6-appen överförs dina glukosvärden till Diasend via "molnet". Du behöver alltså inte använda kabel eller dator för att överföra värdena. Det enda du behöver göra är att koppla ihop ditt Dexcomkonto (G6-appen) med ditt Diasendkonto. Du kan också ge din klinik tillåtelse att se dina glukosvärden i Diasend genom att uppge klinikens ID. Vill du se din doseringshistorik från Tandem t:slim X2 behöver du ladda ner pumpen med hjälp av en micro USB-kabel (som medföljer pumpen), antingen på din klinik eller via din egen dator, till Diasend.

1. Gå in på www.diasend.com och logga in på ditt Diasend-konto. Har du inget konto, skapar du ett.
2. Klicka på "Anslut app". Vid Dexcom G6, välj Anslut.
3. Ange användarnamn och lösenord för **ditt Dexcom-konto**. Följ instruktionerna.
4. Klicka på fliken "Dela data" och skriv in klinikens ID för att ge kliniken tillåtelse att se dina värden i Diasend.
5. Ladda ner Diasend-appen i din mobil och logga in med ditt Diasend-login. Värdena överförs automatiskt till Diasend efter endast 3–4 timmar.

Tänk på att:

Du kan endast ladda upp historik från din pump via en dator. För det krävs programvaran Diasend Uploader.

Har du frågor om Diasend – tveka inte att ta kontakt med Diasend support tel 031-762 88 88 eller sweden@diasend.com. Du kan också hitta information på www.diasend.com.

OBS! Var noga med att skriva ned och spara dina användaruppgifter!

Användarnamn (mailadress)

Lösenord

Klinik-ID Diasend

Steg 3: Ladda ner Dexcom Follow-appen (för dig som ska använda följarfunktionen)



Med Dexcom G6 får du möjlighet att dela dina glukosvärden, till exempel med föräldrar eller någon annan som kan vara ett extra stöd. Du kan maximalt ha fem följare.

1. Följaren laddar ner Dexcom Follow från App Store eller Google Play.
2. Du som användare får bjuda in den du vill ska följa dig genom att skicka ett e-mail från din Dexcom G6-app. Du kan bjuda in upp till fem följare och alla följarna kan ha sina individuellt inställda larm.
3. **OBS!** När du bjuder in din följare via e-post måste följaren kunna öppna e-posten i sin mobil/surfplatta, det vill säga den enhet där följaren är nedladdad. Inbjudan kan ibland hamna i följarens skräppost. Be din följare att kontrollera sin skräppost om inte inbjudan kommit fram.