



Tre viktiga steg att göra hemma innan du startar Dexcom G7 tillsammans med Tandem t:slim X2

Nu är det dags att starta Dexcom G7 CGM tillsammans med din Tandem t:slim X2™ insulinpump.

Om du vill använda din smartphone* som enhet, och för att få tillgång till följarfunktionen, behöver du förbereda tre viktiga steg innan CGM-starten. Allt för att du ska få en så smidig start som möjligt. Du har dessa tre steg beskrivna i den här foldern.

Har du några frågor, tveka inte att ringa eller maila till vår kundsupport så hjälper vi dig.

* Kontrollera att din enhet är kompatibel på:
<https://www.dexcom.com/compatibility>



Steg 1

Ladda ner Dexcom G7-appen

(för dig som bär sensorn)

1. Ladda ner Dexcom G7-appen:



Dexcom G7



App Store



Google Play

2. Skapa ett Dexcom-konto i din G7-app eller logga in med ditt användarnamn och lösenord för ditt befintliga Dexcom-konto om du har ett sedan tidigare.

OBS! Det ska vara en person över 18 år som är kontoansvarig.

Är du under 18 år, skapa ett konto för minderåriga.

3. Resten gör vi på kliniken vid din pumpstart.

OBS! Var noga med att skriva ned och spara dina användaruppgifter! Framför allt är användarnamn och lösenord viktiga för att kunna logga in.

E-postadress/Användarnamn (används vid inloggning)

Användarnamn minderårig-konto

Lösenord (används vid inloggning)

Steg 2

Anslut Dexcom G7-appen till Glooko

Från Dexcom G7-appen överförs dina glukosvärden till Glooko via "molnet". Du behöver alltså inte använda kabel eller dator för att överföra värdena. Det enda du behöver göra är att koppla ihop ditt Dexcom-konto (G7-appen) med ditt Glooko-konto. Du kan också ge din klinik tillåtelse att se dina glukosvärden i Glooko genom att uppege

klinikens ProConnect-kod. Vill du se din doseringshistorik från Tandem t:slim X2™ behöver du ladda ner pumpen med hjälp av en micro-USB-kabel (som medföljer pumpen), antingen på din klinik eller via din egen dator, till Glooko. Information om hur du laddar ner pumpens historik via din egen dator finns sist i denna folder.

1. Ladda ner Glooko-appen i din mobil och logga in med ditt Glooko-login. Du kan även gå in på my.glooko.com via en dator. Har du inget konto, skapar du ett.



Glooko



App Store



Google Play

2. Via appen: Gå till "Synkronisera enhet" och klicka på "Ny enhet". Välj "Kontinuerliga glukosmätare" och sedan "Dexcom" och "Lägg till". Via hemsidan: Klicka högst upp i högra hörnet. Gå in på inställningar och scrolla ner till "Appar och enheter" och klicka på "Dexcom".
3. Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna.
4. Välj "Lägg till vårdteam" i appen och skriv in klinikens ProConnect-kod för att ge kliniken tillåtelse att se dina värden i Glooko.
5. Värdena överförs automatiskt till Glooko efter endast 3–4 timmar.

Har du frågor om Glooko – tveka inte att ta kontakt med Glooko support tel 031-762 88 88 eller help@glooko.com. Du kan också hitta information på support.glooko.com.

OBS! Var noga med att skriva ned och spara dina användaruppgifter!

Användarnamn (e-postadress)

OBS! Ska du koppla en minderårigs konto till Glooko måste du ange Dexcom-kontots e-postadress.

Lösenord

ProConnect-kod klinik

Tänk på att:

Sensorperioder ska alltid startas först via pumpen, appen är endast visningsenhet!

Tänk på att:

Du kan endast ladda upp historik från din pump via en dator. För det krävs programvaran Glooko Uploader.

Steg 3

Ladda ner Dexcom Follow-appen

(för dig som ska använda följarfunktionen)

Med Dexcom G7 får du möjlighet att dela dina glukosvärden, till exempel med föräldrar eller någon annan som kan vara ett extra stöd. Du kan maximalt ha 10 följare.

1. Följaren laddar ner Dexcom Follow:



Dexcom Follow



App Store



Google Play

2. Du som användare får bjuda in den du vill ska följa dig genom att skicka ett e-postmeddelande från din Dexcom G7-app. Du kan bjuda in upp till 10 följare och alla följarna kan ha sina individuellt inställda larm.
3. **OBS!** När du bjuder in din följare via e-post måste följaren kunna öppna e-posten i sin mobil/surfplatta, det vill säga den enhet där följjarappen är nedladdad. Inbjudan kan ibland hamna i följarens skräppost. Be din följare att kontrollera sin skräppost om inte inbjudan kommit fram.

Så här överför du historik från insulinpumpen Tandem t:slim X2™ till Glooko via en egen dator

För att kunna ladda ner din pump till Glooko behöver du din original micro-USB-kabel som du fick med din pump, och programvaran Glooko Uploader installerat på din dator. Följ dessa steg för att ladda ned programvaran Glooko Uploader och börja använda den.


1. Gå in på myglooko.com och logga in på ditt Glooko-konto.
2. Klicka på "Inställningar" vid dina initialer i högra hörnet. Skrolla ner till "Appar och enheter".
3. Klicka på "Skaffa Glooko Uploader" och välj PC eller Mac.
4. Spara installationsfilen på din dator.
5. Leta upp installationsfilen och följ instruktionerna för att installera Glooko Uploader.
6. Starta om din dator och starta sedan Glooko Uploader.
7. Anslut pumpens micro-USB-kabel till din dator.
8. Anslut din pump till micro-USB-kabeln.
9. Starta överföring av data från din pump.
10. Logga in på myglooko.com för att se din data.




Dexcom G7: så fungerar det



Sensorn skickar sensorvärden var femte minut (6 meters räckvidd)

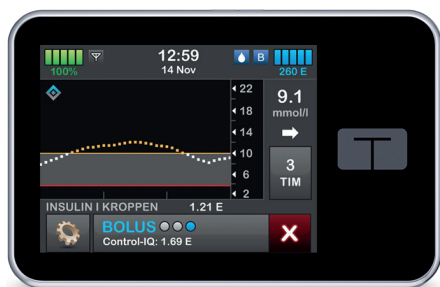

Din Tandem t:slim X2™ insulinpump

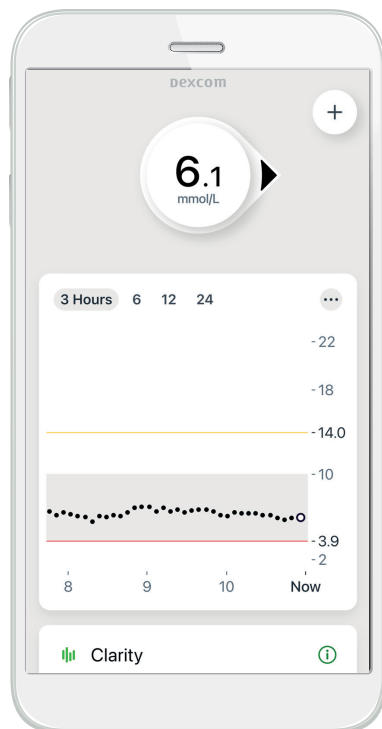

Din smartenhet*
med Dexcom-app

Bilderna i Dexcom G7 appen och Follow appen är endast visningsexempel


*För kompatibla enheter se <https://www.dexcom.com/compatibility>



Dexcom Share



Glooko-appen

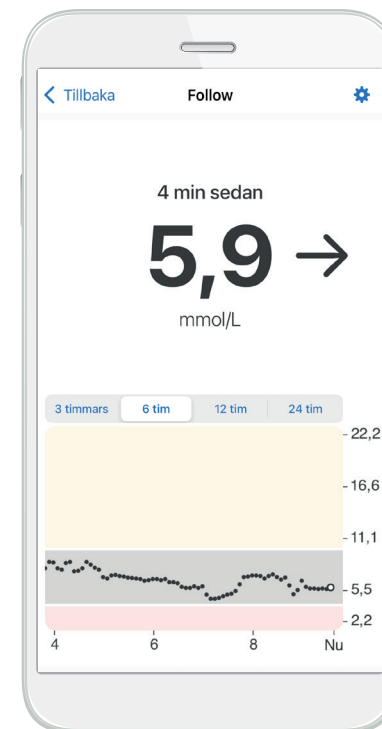

Följarens smartenhet*
med Dexcom Follow

Vi hjälper människor till en tryggare vardag

Med diabeteshjälpmiddel från världsledande tillverkare och ett team av hängivna medarbetare är vi på Rubin Medical stolta över att kunna hjälpa en stor grupp människor till en enklare och tryggare vardag.

Våra produkter förskrivs alltid genom vården och vi har täta samarbeten med diabetesmottagningar i hela Sverige. Instruktionsfilmer, användarberättelser, frågor och svar om våra produkter och mycket mer hittar du på

www.rubinmedical.se

För senaste nytt, följ oss på

facebook.com/rubinmedical
instagram.com/rubin.medical

Kundsupport vardagar 08–16.30: **040-15 54 80**

Teknisk pumpsupport övrig tid: **044-330 220**

www.rubinmedical.se

